

Collamed® / Collamed® long

Joelheira com limitação de extensão/
flexão, feita em material Airtex

Indicações


- tratamento conservativo de lesões ligamentosas colaterais
- instabilidades moderadas dos ligamentos cruzados
- lesões do menisco
- instabilidade crónica
- alterações traumáticas ou degenerativas da articulação do joelho

Modo de acção

- prevenção de hiperextensão e limitação da gama de movimentos graças às articulações Physioglide
- excelente estabilização colateral da articulação do joelho graças às barras laterais compridas
- joelheira macia com efeito de compressão e proprioceptivo

Características

- articulações Physioglide policêntricas com base no princípio da ligação em 4 cadeias
- excelente conformidade graças à versão envolvente com fecho em velcro à frente e material de rede persistente atrás (Collamed long com recorte popliteal)
- feita em material Airtex medi elástico, respirável e que afasta a humidade
- utilização sem problemas em desportos de contacto
- limitação da extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- limitação da flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- disponível como versão universal utilizável tanto à esquerda como à direita

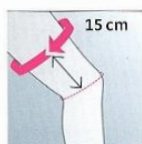

Collamed



Collamed long



Vantagens do produto



Articulação Physioglide
Um design de articulação policêntrico único que imita na perfeição o movimento de rodar e deslizar do joelho.



medi airtex

Collamed / Collamed long

tamanho	circunferência cm	número do artigo	
		Collamed	Collamed long
XS	31 – 37	G.060.121	G.060.111
S	37 – 45	G.060.122	G.060.112
M	45 – 51	G.060.123	G.060.113
L	51 – 57	G.060.124	G.060.114
XL	57 – 65	G.060.125	G.060.115
XXL	65 – 74	G.060.126	G.060.116

medição: circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medido no lado medial da coxa)